

GC复合树脂研磨系统

ジーシーのコンポジットレジン研磨システム



牙科修整用金刚砂车针
SMOOTH CUT

牙科橡胶抛光头
Pre Shine / Dia Shine



Pre Shine

Dia Shine

15,000~25,000 转/分钟
30,000 转/分钟



产品规格:

128

113s

104



128

113s

104

SMOOTH CUT

100,000 转/分钟



产品规格:

D16Lff

V16ff

D4012ff

C17ff

D17ff

C16ff

*左图为工作部分特写,右图为产品整体,图片仅供参考

GC复合树脂研磨系统

形态修正-粗研磨



国械备20240146

SMOOTH CUT


牙科修整用金刚砂车针

规格: C16ff、C17ff、D16Lff、D17ff、D4012ff、V16ff

材质: ①杆: 不锈钢

杆的类型: 根据YY/T 0967, 3型杆(φ1.6 mm FG用)

②工作部分: 底座-不锈钢, 磨粒-金刚砂, 电镀-镍

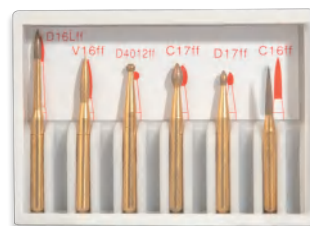

中精研磨



国械备20240144

Pre Shine

牙科橡胶抛光头

规格: 104、113S、128

CA

材 质: ①杆、底座材料: 不锈钢

②工作部分: 合成橡胶

白刚玉磨粒

精研磨



国械备20240256

Dia Shine

牙科橡胶抛光头

规格: 104、113S、128

CA

材 质: ①杆、底座材料: 不锈钢

②工作部分: 硅橡胶

金刚石磨粒

Pre Shine / Dia Shine 通用规格 • 推荐转速为15,000~25,000转/分(最高允许转速为30,000转/分),可使用高压蒸汽灭菌、化学灭菌或EOG进行灭菌。

形态修正-粗研磨

中精研磨

精研磨

SMOOTH CUT

Pre Shine

Dia Shine

*禁忌内容或者注意事项详见说明书



而至齿科(苏州)有限公司
江苏省苏州市工业园区青丘街127号
电话:+86-(0)512-6283 3083
传真:+86-(0)512-6283 3089

而至齿科(苏州)有限公司 上海分公司
上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦1004室
电话:+86-(0)21-6209 0008
传真:+86-(0)21-6208 6748

苏械广审(文)第261120-27785号